

OPTIDISC

Polimento de restaurações

Resina composta, ionômero de vidro, amálgama, metais preciosos e semipreciosos.


Indicação

Restaurações anteriores e posteriores, superfícies convexas ou planas.



Discos descartáveis.

Discos de lixa disponíveis em quatro granulações e transparentes, para não colorir a restauração e facilitar a visualização. Sem centro metálico e mandril com encaixe que não ultrapassa o limite do disco, assegurando um procedimento preciso, protegendo dentes vizinhos contra arranhões ou danos aos tecidos.

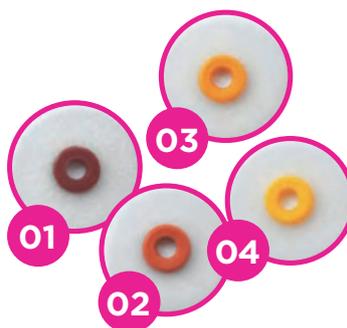

Seguro! O lado ativo do OptiDisc é fácil de reconhecer e o mandril patenteado fica abaixo da superfície do disco, protegendo a sua restauração contra arranhões.

Cores e abrasividade do OptiDisc em quatro diferentes níveis de granulações e tamanhos, dependendo do sua necessidades: 9,6 mm e 12,6 mm.

Camada abrasiva sem revestimento adesivo extra, no momento em que fixar o disco no mandril, ele está pronto para usar!

Composição básica

Discos translúcidos (poliéster) impregnado de partículas de óxido de alumínio.

- 01. Contorno - extragrosso (80 µm)
- 02. Acabamento - grosso/médio (40 µm)
- 03. Polimento - fino (20 µm)
- 04. Alto brilho - extrafino (10 µm)

Apresentação

Kit OptiDisc (15 discos de cada um dos 8 tipos + 1 mandril)
Kit OptiDisc Remoção de excessos (15 discos extragrosso 12.6mm, 15 discos extragrosso 9.6mm, 15 discos grosso/médio 12.6mm, 15 discos grosso médio 9.6mm + 1 mandril)

Refis:

- OptiDisc extragrosso 12.6mm (30 unid.)
- OptiDisc extragrosso 9.6mm (30 unid.)
- OptiDisc grosso/médio 12.6mm (30 unid.)
- OptiDisc grosso/médio 9.6mm (30 unid.)
- OptiDisc fino 12.6mm (30 unid.)
- OptiDisc fino 9.6mm (30 unid.)
- OptiDisc extrafino 12.6mm (30 unid.)
- OptiDisc extrafino 9.6mm (30 unid.)
- OptiDisc mandril (1 unid.)

NOVO

Kit OptiDisc™ com polimento grosso e médio

2 granulações ideias para remoção de excessos

